

AIR-FLEX

Flexion-Distraktion



Forsco Labs

Exclusive Distributor - HILL Laboratories

WWW.FORSCOLABS.DE

AIR-FLEX

Die einzige chiropraktische Behandlungsliege seiner Art

Die Air-Flex-Liege hat die chiropraktische Behandlung revolutioniert. Wenn Sie einmal Ihre Patienten mit Hilfe einer Air-Flex-Liege behandelt haben, werden Sie nie wieder mit einer üblichen Behandlungsliege zufrieden sein. Die charakteristischen Eigenschaften der Air-Flex-Liege finden Sie nachstehend. Wählen Sie aus den vielen Ihnen zur Verfügung stehenden Optionen diejenigen, die Sie für Ihre speziellen Bedürfnisse benötigen.



Dargestelltes Modell:

Polsterung Azur
Graue Basis

Verriegelungsgriff

Elektrisch höhenverstellbar durch ein Fusspedal

STANDARD FUNKTIONEN

- Flexion und Distraction (Pneumatisch, manuell gesteuert)
- Schrägstellung des Kopfteils und Thoraxfreigabe
- Abnehmbare Kontrollstange am Fußende
- Dreh- und Seitenflexion mit Verriegelungsmechanismen
- Ausziehbare Knöchelstütze mit Knöchelgurten
- Höhenbereich von 54 - 74 cm
- Höhenverstellbar über Fusspedal
- Breite 60 cm, Länge 173 - 196 cm)
- Schaumstoffpolsterung 6.5 cm in medium, weich oder hart.
- Polsterung in 20 Farben verfügbar
- Basis in 3 Farben verfügbar (beige, grau oder schwarz)
- Einjährige Garantie auf alle Teile, Werkstattreparaturen




Regelbare Knöchelunterstützung

AIR-FLEX OPTIONEN

Nach Mass hergestellt

- ▶ **DROP PNEUMATISCH GESTEUERT**
Die Air-Flex-Liege kann mit bis zu vier pneumatisch gesteuerten Drops ausgestattet werden
- ▶ **TRENNBARER THORAXBEREICH**
Öffnen des Brustbereiches durch pneumatische Steuerung
- ▶ **KOPFTEIL**
Beim Kopfteil können Sie folgende andere Optionen auswählen (Standardausführung : kippbar)

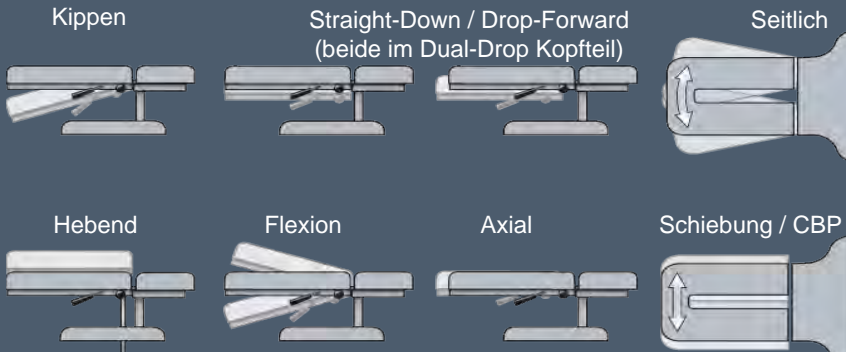

- ▶ **AUTO-FLEX**
Auto-Flex ermöglicht Ihnen, Ihre Patienten manuell zu behandeln oder ganz einfach auf motorisierte Auto-Flexion umzuschalten. Mit dem Touchscreen steuern Sie die Tiefe, Geschwindigkeit, Kraft, Ruhezeit und Zyklen.

Das 6.1" HD Touch-Screen-Panel bietet eine digitale Genauigkeit, kontrollierte, vollständige und wiederholbare Behandlungen.





- ▶ **AUTO-DISTRACTION**
Auto-Distraktion fügt dem Hill-Air-Flex eine programmierbare automatische Dekompressions-Traktion hinzu. Verfügbar sowohl für die Lenden- und Halswirbelbereiche, können Sie Langzeit-Traktion in der gewünschten Stärke anwenden. Für den Lendenwirbelbereich ist der Patient mit Knöchelriemen und einem Gegenzugriemen um den unteren Rücken gesichert. Das untere Teil der Liege kann in einer seitlichen und / oder schrägen Position bewegt und verriegelt werden.




Die zervikale oder Nacken-Traktion wird mit unserem komfortablen und sicheren Cervical Traction Device geliefert. Sie gewährleistet eine vollständige Einkapselung des Hinterkopfes.

- ▶ **SCREEN-STEUERUNG**
Mit dem Touchscreen kontrollieren und steuern Sie Ruhezeit, Pull-Zykluszeit, Ruheprozentage, Behandlungszeit und -stärke.

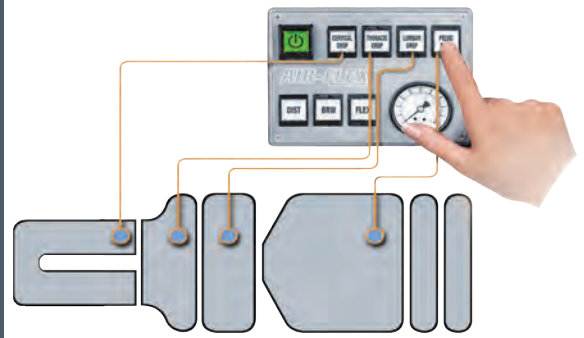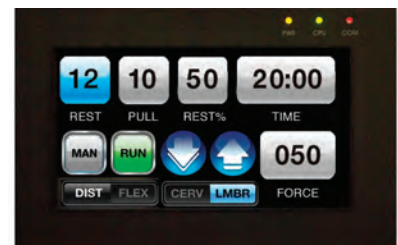

Thorax / Abdominal trennbar (Breakaway)

Dropsaktivierungs-Stange

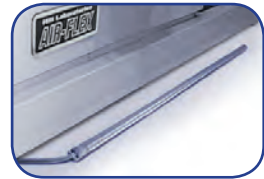

Laufrollen



Fußschalter für Höhenverstellung



Auto-Distraktion-Kontrollschirm

SPEZIFIKATIONEN

AIR-FLEX

- Versorgung 220-50Volts 10 Ampere
- Tragfähigkeit - 204 kg
- Länge : 172 cm (196 cm ausziehbar)
- Breite : 60 cm (in Option 68 cm - 76 cm)
- Höhenbereich : 54 bis 74 cm (andere Höhen auf Anfrage)
- Mittlere Dichte Polsterung in Standard *
- Auswahl von 20 Farben für die Polsterung (siehe unten)
- Thermoplastische Farbe der Basis feuerfest, Anti-bakteriell
- Versandgewicht 113 -136 kg
- Garantie, 1 Jahr Teile und Werkstattreparaturen

AIR-FLEX DELUXE

Beinhaltet alle Funktionen von Air-Flex, folgende Funktionen kommen hinzu:

- Double Air Drop des Kopfteils
- Air-Drop Thorax
- Air-Drop Lenden
- Air-Drop Becken
- Air-thorax trennbar (breakaway)
- Zwei Fusstangen für Air Drop-Steuerung

*auf Anfrage auch in weich und hart erhältlich

POLSTERFARBEN



FARBEN DER BASIS



OPTIONAL POLSTER FINESSE®



Die Boltaflex® Beschichtung mit Prefix™, ist wissenschaftlich entwickelt worden und gibt einen ausgezeichneten Schutz gegen Flecken und Kratzer. Sie ist garantiert gegen Platzen.

Farbtöne wie oben abgebildet können von den realen Farben abweichen.

Besuchen Sie WWW.FORSCOLABS.DE, um Ihre Air-Flex-Liege zusammenzustellen und Ihr Online - Angebot zu erstellen.

Treten Sie in kontakt mit einem unserer Mitarbeiter, der gerne alle Ihre Fragen beantworten wird.

ForscoLabs
Exclusive Distributor - HILL Laboratories

149 avenue du Maine 75014 Paris, France
Tel: +33 1 83 597 160 - Fax:+33 1 92 447 924
contact@forscolabs.de - www.forscolabs.de